

**Navodila za
uporabo**

Philips Sonicare
DiamondClean

300 series

Rechargeable
sonic toothbrush




PHILIPS
sonicare
the **sonic** toothbrush

1	Predstavitev	3
2	Opis izdelka	3
3	Pomembno	4
4	Pred prvo uporabo	5
5	Uporaba	6
6	Privajanje na izdelek	7
7	Na potovanju	8
8	Čiščenje	9
9	Shranjevanje	10
10	Odlaganje med odpadke	11
11	Garancija in servis	12

I**Predstavitev**

Svojo zobno ščetko Sonicare registrirajte na spletni strani www.sonicare.si in si zagotovite vso podporo.

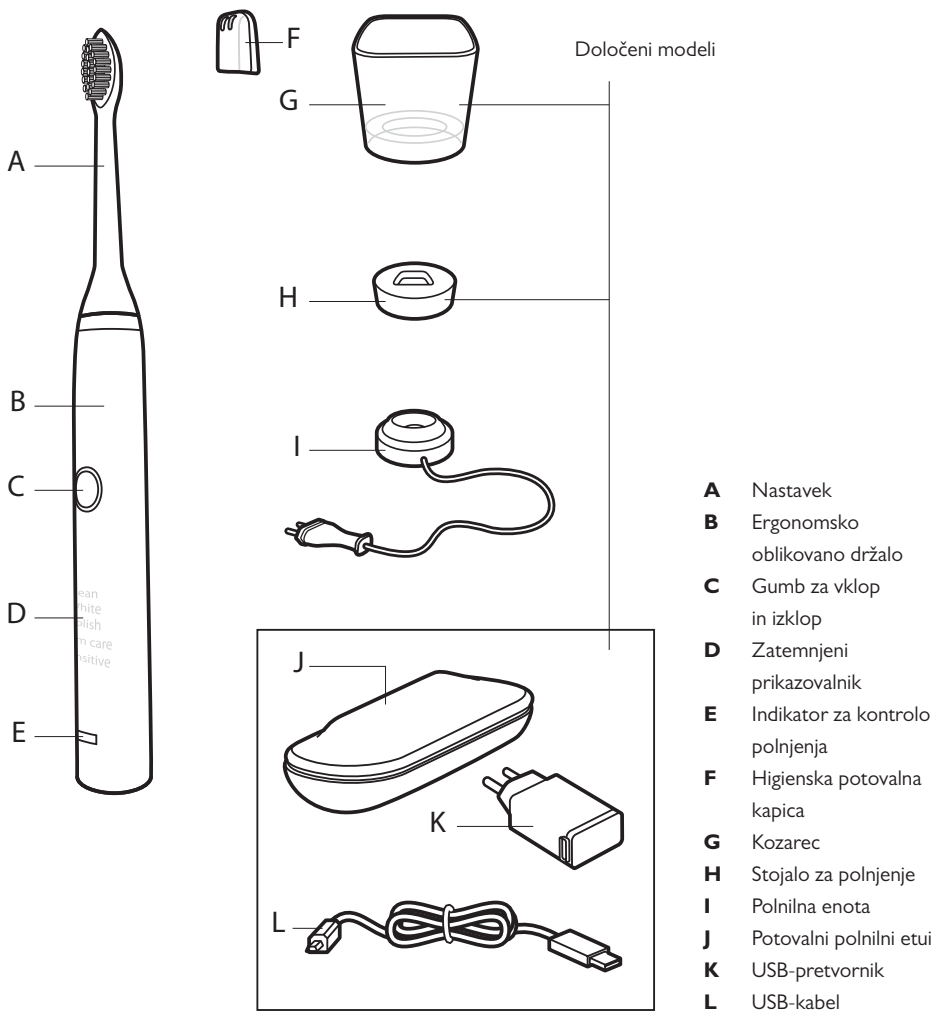2**Opis izdelka**

Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila in jih shranite, če jih boste morda potrebovali tudi pozneje.

Nevarnosti

Polnilne enote ne postavljajte blizu vode. Ne postavljajte ali shranjujte je na mesta, kjer lahko pade ali bi jo lahko potegnili v kad, umivalnik ali školjko. Polnilne enote ali potovalnega etuija ne potaplajte v vodo ali katero drugo tekočino. Po čiščenju se prepričajte, da sta polnilna enota in potovalni etui suha, preden ju vklopite v vtičnico.

Opozorila

- Preden napravo vklopite v vtičnico, preverite, ali napetost, označena na napravi, ustreza vaši napetosti v vtičnici.
- Nikoli ne uporabljajte polnilne enote ali potovalnega etuija, če sta poškodovana. Če je polnilna enota, potovalni etui, kabel ali vtič poškodovan, jih vedno nadomestite z originalnim delom in se tako izognite nesreči.
- Če je naprava kakor koli poškodovana (nastavek, držalo), jo prenehajte uporabljati. V embalaži niso priloženi nadomestni rezervni deli. Če je naprava poškodovana, pokličite servis (glejte poglavje »Garancija in servis«).
- Polnilne enote in potovalnega etuija ne uporabljajte na prostem ali blizu izvora toplote.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo pri ljudeh (vključno z otroki) z zmanjšano telesno, čutno ali duševno sposobnostjo ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih pri uporabi naprave nadzirajo ali o uporabi poučijo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
- Otroci naj bodo pod nadzorom. Bodite pozorni na to, da se z napravo ne igrajo.

Previdno

- Naprave ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
- Če ste imeli v zadnjih dveh mesecih poseg v ustih ali operacijo dlesni, se pred uporabo tega proizvoda posvetujte z zobozdravnikom.
- Z zobozdravnikom se posvetujte tudi ob močnem krvavenju po uporabi naprave, ali če se krvavenje ne ustavi po enem tednu uporabe.
- Električna zobna ščetka Sonicare je bila preizkušena in je skladna z varnostnimi standardi za elektromagnetne naprave. Če imate srčni spodbujevalnik ali katero koli implantirano napravo, se obrnite na svojega zobozdravnika ali proizvajalca teh naprav.
- Ta naprava je narejena samo za čiščenje vaših zob, dlesni in jezika. Ne uporabljajte je za druge namene. Prenehajte z uporabo, če začutite neugodje ali bolečino, in se posvetujte z zdravnikom ali zobozdravnikom.
- Če imate zdravstvene težave, se pred uporabo zobne ščetke Sonicare posvetujte z zdravnikom.
- Električna zobna ščetka Sonicare je samo za osebno uporabo. Ni primerna za uporabo pri pacientih v zobozdravstvenih ordinacijah.
- Izogibajte se uporabi nastavkov s polomljenimi ali opognjenimi ščetinami. Poškodovane ščetine se med ščetkanjem lahko odlomijo. Nastavek zamenjajte z novim vsake 3 mesece ali prej, če se pojavijo znaki obrabe.
- Nastavkov ne čistite v pomivalnem stroju.
- Uporabljajte samo dele, ki jih priporoča proizvajalec.
- Otroci naj bodo pod nadzorom, dokler se ne naučijo pravilno umivati zob.
- Če je v vaši zobni pasti peroksid, soda bikarbona ali kateri drug bikarbonat (značilno za belilne zobne paste), po vsaki uporabi temeljito očistite nastavke in držalo z milom in vodo, sicer se lahko pojavijo razpoke na plastiki.


ELEKTROMAGNETNA POLJA (EMP)

Naprava ustreza vsem standardom v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMP). Če z napravo ravnamo pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njena uporaba varna (utemeljeno na znanstvenih dokazih, ki so danes na voljo).

4 PRED PRVO UPORABO

Polnjenje – Pred prvo uporabo polnite držalo 24 ur. Indikator za kontrolo polnjenja utripa zeleno, dokler držalo ni popolnoma napolnjeno. Hitro utripajoča rumena lučka pove, da je baterija skoraj prazna (za manj kot še 3 uporabe). Preberite poglavje »Na potovanju« za še druge možne načine

polnjenja. Polnilna enota s kozarcem je oblikovana tako, da lahko pravilno polnite samo eno držalo naenkrat. V kozarec ne dajate kovinskih predmetov, ker lahko vplivajo na proces polnjenja in povzročijo pregretje polnilne enote. Polnilna enota ni združljiva z ostalimi modeli zobne ščetke Sonicare. Maksimalno napolnjena baterija vzdrži do tri tedne uporabe.

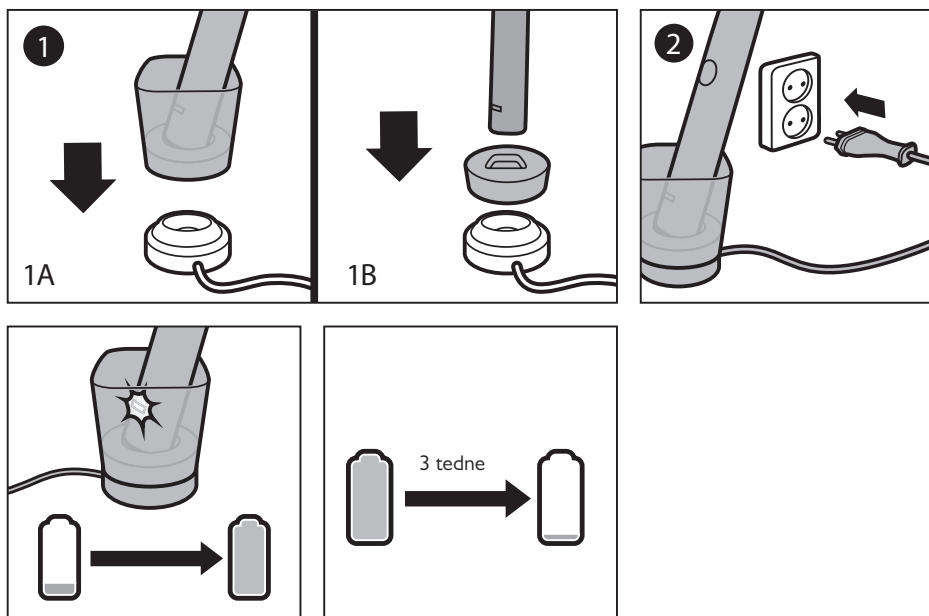

5 UPORABA

Ščetkajte tako, da nastavek nežno in počasi premikate po zobeh, v kratkih pomikih naprej in nazaj, tako da daljše ščetine sežejo med vaše zobe. Ne ščetkajte tako, kot bi ščetkali z ročno zobno ščetko. Rahlo pritisnite, da povečate učinkovitost električne zobne ščetke Sonicare, ki naj delo opravi namesto vas.

Funkcija Quadpacer je intervalni merilnik časa, ki vas z zvočnim signalom in kratko prekinitvijo ščetkanja opomni, da očistite vsa štiri področja vaših zob. Quadpacer vas bo opozoril v različnih intervalih, odvisno od tega, kateri način ščetkanja ste izbrali:








Clean – najboljši način pri odstranjevanju plaka (standardni način)

White – dvominutno beljenje, ki odstrani površinske madeže, in dodatnih 30 sekund za posvetlitev in poliranje vaših sprednjih zob

Polish – hitro enominutno ščetkanje za posvetlitev in poliranje vaših sprednjih zob

Gum care – popolno ščetkanje celotnih ust, ki združuje način Clean z dodatno minuto nežne stimulacije in masaže vaših dlesni, kar izboljša zdravje dlesni

Sensitive – nežno ščetkanje za občutljive zobe in dlesni

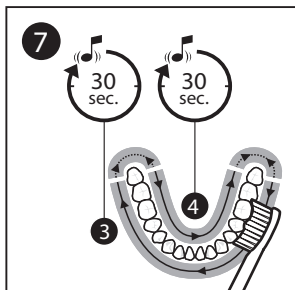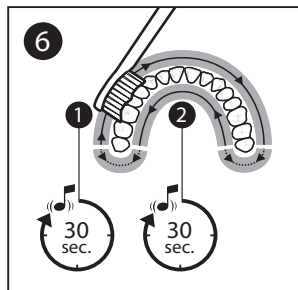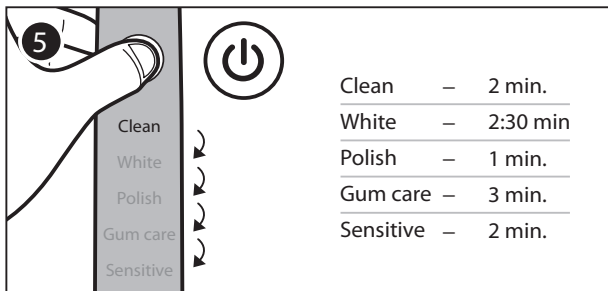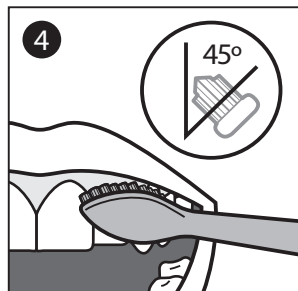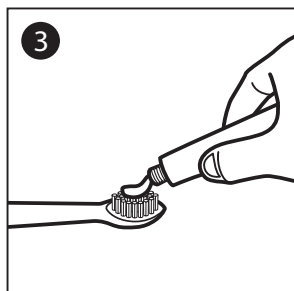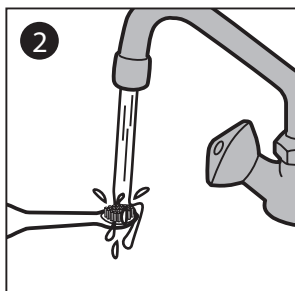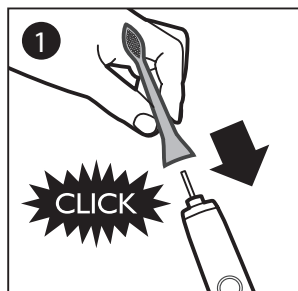


6 PRIVAJANJE NA IZDELEK

Easy-start – Zobna ščetka Sonicare vas lahko pri prvih uporabah žgečka. Za lažje privajanje funkcija Easy-start postopoma povečuje moč ščetkanja prvih 14 ščetkanj. Pravilno pomikanje skozi funkcijo Easy-start pomeni, da vsako ščetkanje traja vsaj eno minuto.

Vključitev in izključitev funkcije Easy-start –







Držalo postavite na polnilno enoto ali potovalni etui, pritisnite in 2 sekundi držite gumb za vklop in izklop. En zvočni signal pove, da je funkcija izključena, dva zvočna signala pa sporočata vključeno funkcijo. Pri kliničnih raziskavah mora biti zobna ščetka Sonicare maksimalno napolnjena in funkcija Easy-start izključena.

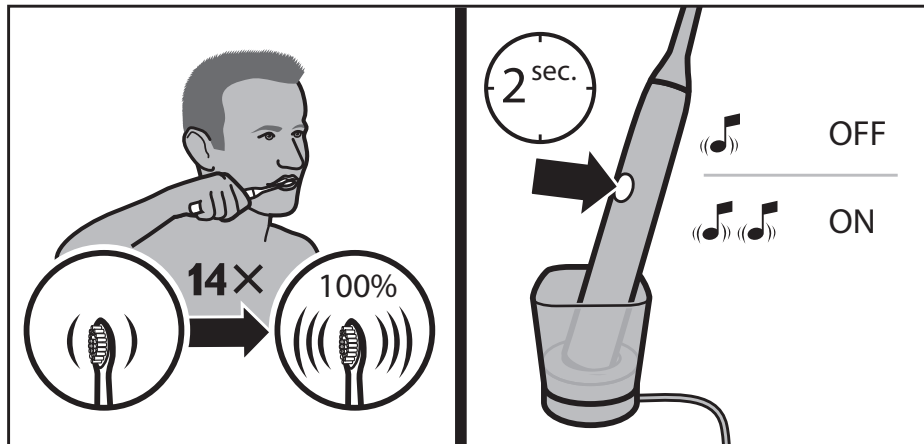

7 NA POTOVANJU


Polnjenje s stensko vtičnico – Držalo položite v potovalni etui, USB-kabel vključite v USB-pretvornik in le-tega v vtičnico. Indikator polnjenja na držalu utripa zeleno, dokler ni držalo popolnoma napolnjeno.

Polnjenje z USB – Odstranite kabel iz stenskega USB-adapterja in vstavite USB-vtič v kateri koli USB-vhod. Uporabljajte samo USB-pretvornik in USB-kabel, ki sta priložena.

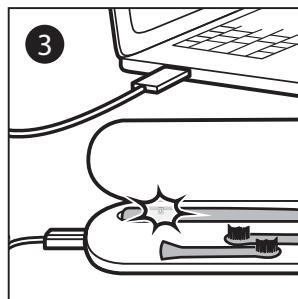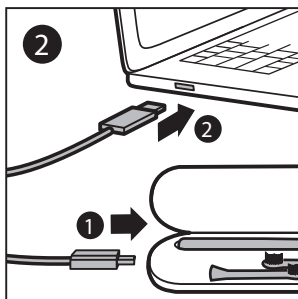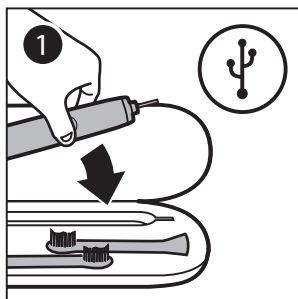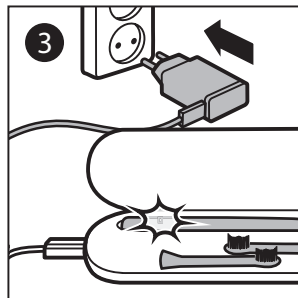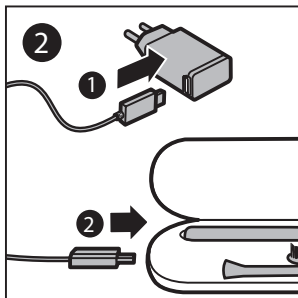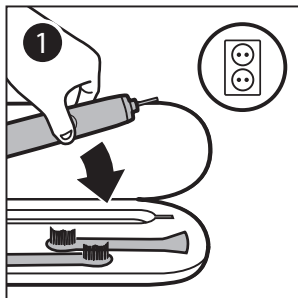


8 ČIŠČENJE

Napravo redno očistite. Splaknite držalo in nastavke. Vse površine očistite z mehko krpo in milom. Pri čiščenju ne uporabljajte ostrih predmetov. V pomivalnem stroju lahko umijete samo kozarec (v pomivalnem stroju ga postavite na zgornjo mrežo). Nastavkov, držala in polnilne enote ali potovalnega etuija ne čistite v pomivalnem stroju.

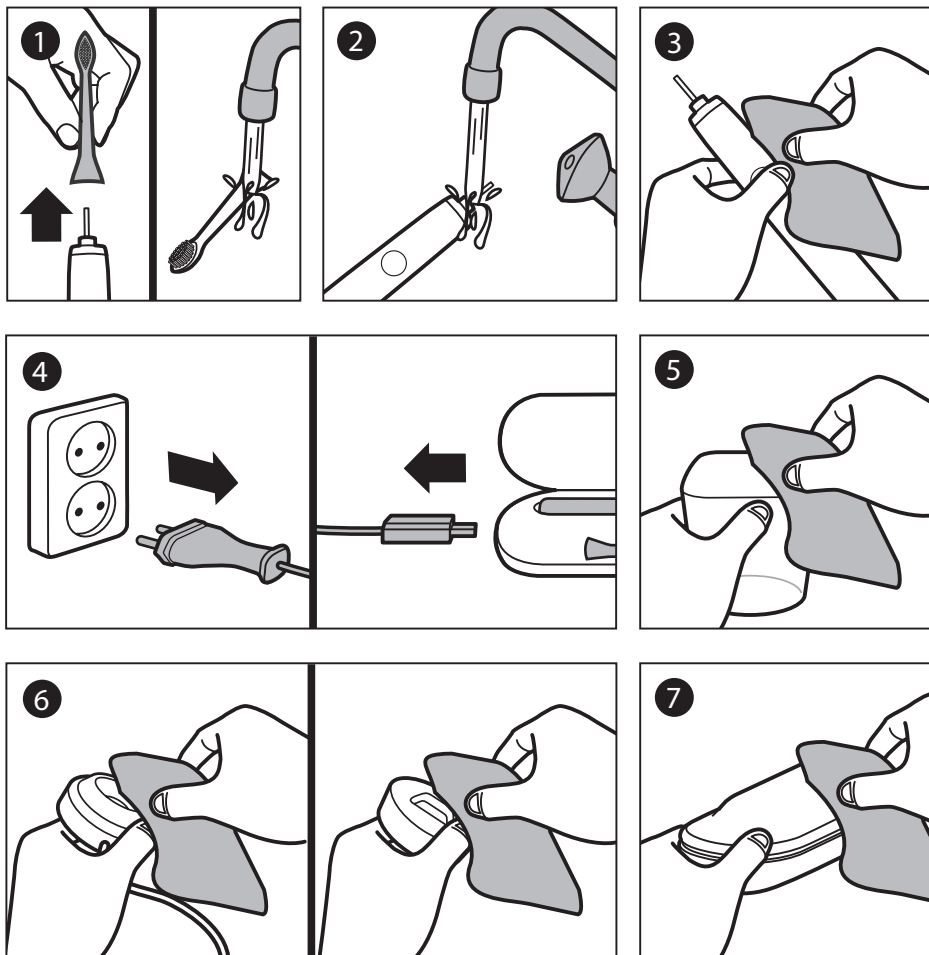

9 SHRANJEVANJE

Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo izklopite iz električnega omrežja, očistite in shranite na hladnem in suhem, stran od neposredne sončne svetlobe.

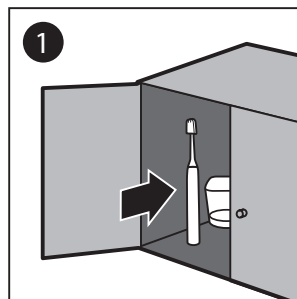








10 ODLAGANJE MED ODPADKE

Naprave ne odvrzite med običajne gospodinske odpadke, ampak med zbirne odpadke ali jo oddajte v zbirni center, ki poskrbi za recikliranje. S tem varujete okolje.

Baterijo odstranite, šele ko se naprava okvari. Potem ko boste držalo električne zobne

ščetke Sonicare odprli, ščetka ne bo več uporabna! Prepričajte se, da je polnilna baterija res izpraznjena. Upoštevajte osnovna varnostna navodila.

Kako odstraniti baterijo – Držalo položite na trdo podlago in s kladivom nežno udarjajte približno 2,5 cm od spodnjega roba držala. Držalo zasučite za 90 stopinj in ponovite, dokler se spodnji pokrov ne loči od ročaja.

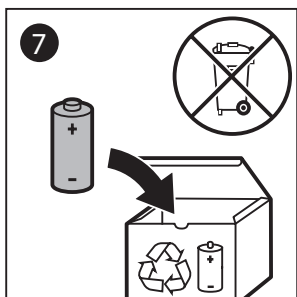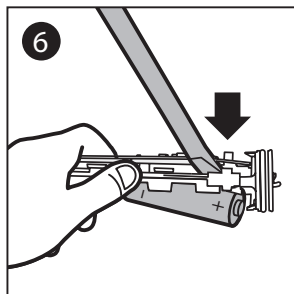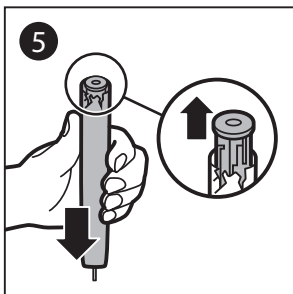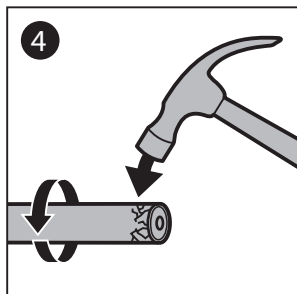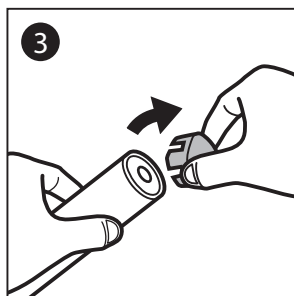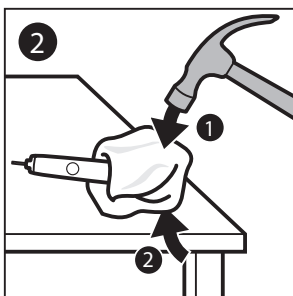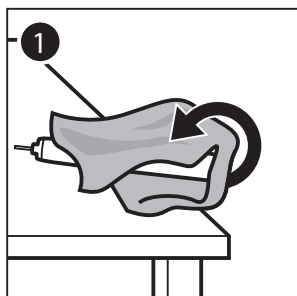

II GARANCIJA IN SERVIS

Garancija velja dve leti od dneva nakupa.

Izjava: uvoznik jamči za kakovost blaga oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku (dve leti), ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija se nanaša na držalo in polnilnik, ne pa na nastavke.

Garancija se ne nanaša na normalno obrabo izdelka, kot so praske, odrgnine, abrazija materiala, razbarvanje materiala.

Garancija za držalo in polnilnik vaše zobne ščetke Sonicare velja dve leti od dneva nakupa. Če držalo ali polnilnik zaradi katerega koli vzroka v prvih dveh letih uporabe ne bi več delovala, bo proizvajalec oziroma dobavitelj (podjetje Flegis, d. o. o., v Sloveniji) okvarjene dele brezplačno zamenjal z novimi (velja za polnilnik in držalo, ne pa tudi za nastavke).

Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom, uporabe z električnimi pretvorniki ali transformatorji in mehanske poškodbe so pri tem izzete.

Garancija velja, če je datum prodaje na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca. Če garancijski list ni pravilno izpolnjen, predložite račun.

Garancija preneha, če je bilo ugotovljeno, da je v proizvod posegla nepooblaščen oseba ali je vanj vgrajen neoriginalni del.

Po preteku garancijskega roka bo proizvajalec nadomestne dele zagotavljal še 3 leta.

Zastopnik za Slovenijo

flegis



Zdrav nasmeh
je uspeh!

Sedež:
FLEGIS, d. o. o.
Ulica mladinskih brigad 54
2204 Miklavž na Dravskem polju

PE Maribor:
FLEGIS, d. o. o.
Perhavčeva ulica 22
2000 Maribor

Tel.: 02/460 53 42
Servis: 02/460 53 46
Faks: 02/460 53 43
E-pošta: info@flegis.si
www.flegis.si

Datum prodaje:

Žig in podpis prodajalca: